

# LCexv 4010 MediLine

Combinato da laboratorio con  
comando elettronico comfort

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_


AIA # \_\_\_\_\_



## Smart Monitoring

### SmartMonitoring integrabile successivamente

Lo SmartMonitoring di Liebherr offre una soluzione completa per la documentazione e il monitoraggio dei dati di misurazione e di funzionamento, dei messaggi di allarme e degli stati delle apparecchiature. Per collegare a questa apparecchiatura lo SmartCoolingHub necessario, si deve utilizzare il convertitore di interfaccia RS 485, disponibile separatamente.

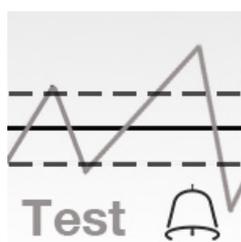

### Test degli allarmi

Questa funzione permette di controllare lo stato del sistema di allarme, interno o esterno. Il funzionamento dell'apparecchiatura e la temperatura interna non vengono compromessi da questo test.



### Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.



### Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.

# LCexv 4010 MediLine

Combinato da laboratorio con  
comando elettronico comfort

## Volume lordo/utile

Frigorifero 254/240 l

Congelatore 107/105 l

Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 601/618/2003

## Dimensioni interne in mm (L/P/A)

Frigorifero 440/441/1105

Congelatore 433/433/597

Consumo energetico in 365 giorni 657 kWh

Temperatura ambiente +10 °C a +35 °C

Dissipazione di calore 367

Gas refrigerante R 600a

Rumorosità (potenza sonora) 52 dB(A)

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Sistema di raffreddamento ventilato

Sbrinamento automatico

## Intervallo di temperatura

Frigorifero +3 °C a +16 °C

Congelatore -9 °C a -30 °C

Materiale del corpo esterno/colore acciaio / bianco

Materiale porta acciaio

Materiale contenitore interno PS termoformato ad uso alimentare

Tipo di comando Display a LED a 7 segmenti con tasti

Allarme in caso di innalzamento della temperatura ottico ed acustico

Allarme mancata alimentazione al ritorno di alimentazione

Contatto a potenziale zero sì

Tipo di rete SmartCoolingHub

Soluzione di rete Integrabile

Interfaccia RS485

## Griglie regolabili di appoggio

Frigorifero 4

Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P) 440 / 409

Carico massimo griglie di appoggio 40 kg

Numero di cassette 3

Maniglia maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato

Chiusura azionamento meccanico

Battuta della porta cerniera destra / reversibile

Peso lordo/netto 92/85 kg

EAN-Nr. 9005382237151

2023.04.05